


Annosaerosolin käyttäminen tilajatkeen kanssa


Annosaerosolin kanssa käytettävät tilajatkeet helpottavat lääkkeen annostelua keuhkoihin. Ne ovat hyödyllisiä kaikenikäisille potilaille. Tucker käyttää annosaerosolissaan aina tilajatketta. Muista pyytää aikuiselta apua tilajatkeen käyttöön ja puhdistukseen.

Valmistautuminen

- 1 Irrota annosaerosolin korkki ja aseta suukappale tilajatkeen kumipäässä olevaan aukkoon.

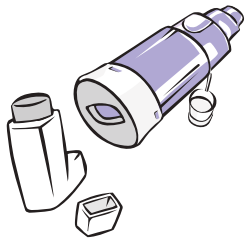

- Jos käytät kasvomaskia**
– Aseta se tukevasti suukappaleen päälle.

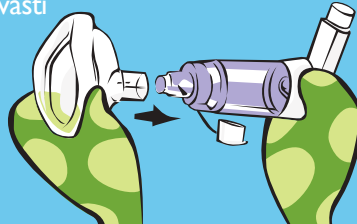

- 2 Ravista sumutinta ja tilajatketta 4–5 kertaa.



- 3 Laita tilajatkke suuhun, sulje huulet tiiviisti sen ympärille ja hengitä ulos.



Lääkkeen ottaminen

- 4 Kun alat hengittää hitaasti sisään suun kautta, paina sumutinta kerran.

- 5 Hengitä mahdollisimman hitaasti ja syvään.

- 6 Pidätä hengitystäsi, laske 10:een ja hengitä ulos.

- 7 Jos lääkäri kehottaa ottamaan toisen suihkauksen, ota se ohjeen mukaan.



Jos käytät kasvomaskia

– Pidä sitä painettuna suun ja nenän päällä. Paina yksi suihkaus lääkettä tilajatkeeseen ja hengitä suun kautta sisään ja ulos 6 kertaa.




Tilajatkeen puhdistaminen

- 1 Pese tilajatkke kerran viikossa.

- 2 Irrota suukappaleen korkki.



- 3 Kierrä suukappaletta ja nosta se irti.

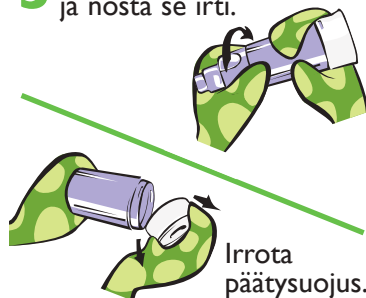

Irrota päätysuojus.

- 4 Liota näitä osia 10 minuutin ajan lämpimässä saippuavedessä.



- 5 Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

- 6 Kokoa osat uudelleen ja säilytä niitä turvallisessa, kuivassa paikassa.

**Philips Healthcare on osa
Royal Philips -yhtiötä.**

Yhteystiedot

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka
+49 7031 463 2254

Latinalainen Amerikka
+55 11 2125 0744

Pohjois-Amerikka
+1 425 487 7000
+1 800 285 5585 (ilmaispuhelu Yhdysvalloissa)

Respironics Respiratory Drug
Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Iso-Britannia

Asiakaspalvelu
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (ilmaispuhelu Yhdysvalloissa)

Philips Respironics Aasian ja Tyynenmeren alue
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia
+61 (2) 9947 0440
+1300 766 488 (ilmaispuhelu Australiassa)

Philips Respironics Kiina
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Suomi
+358 (0)9 61580400

Philips Respironics Saksa
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Ranska
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Italia
+39 039 203 1

Philips Respironics Ruotsi
+46 8 120 45 900

Philips Respironics Sveitsi
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Iso-Britannia
+44 800 1300 845

www.philips.com/respironics

Respironics, Sami the Seal ja Tucker the Turtle ovat
Koninklijke Philips N.V.:n ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.



Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/asthma



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips Healthcare varaa oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja/tai lopettaa jonkin tuotteen valmistuksen milloin tahansa ilman mitään velvoitetta ja siitä erikseen ilmoittamatta eikä ole vastuussa mistään tämän julkaisun käytöstä johtuvista seurauksista.

KS 07/15/18 PN1551944